




# Эндоскопия Mindray



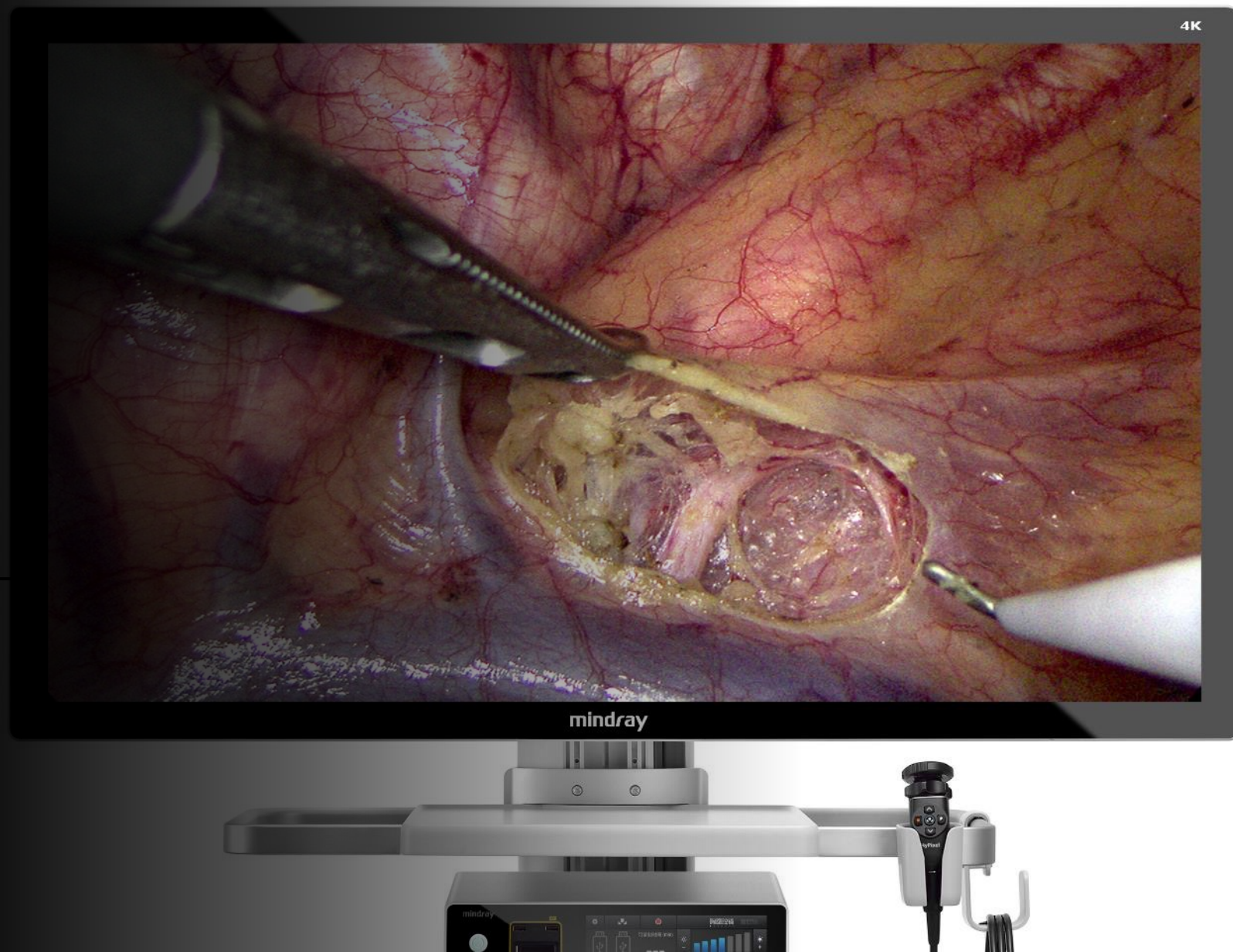

**2012**

У истоков –  
эндоскопические  
инструменты



**2015**

ОЕМ Первая система  
изображения Full HD



**2017**

HD3 FullHD система  
изображений от  
Mindray R&D



**2020**

U1 4K Ultra HD  
система  
изображений от  
Mindray R&D



**2021**

R1 4K+NIR система  
изображений от Mindray  
R&D



**2022**

Гистероскопы и  
инструменты для  
гистероскопических  
операций



**2022**

Гистеропомпа



**2022**

Энергетическая платформа и  
УЗ хирургические  
инструменты





Мы стремимся к тому, чтобы каждая операционная минимально инвазивной хирургии по всему миру использовала **качественную** систему эндоскопической визуализации

Универсальная платформа с отличным качеством картинки благодаря алгоритму обработки изображения

**3 чиповая головка CMOS** с оптическим зумом, легкая, с низкой интенсивностью нагрева. Парфокальная технология (фокусное расстояние **14-30мм**) подходит для широкого профиля операций

**LED** источник света эквивалентный **300Вт** ксеноновому с цветовой температурой **3000-7000K** и сроком службы **>20000 часов** работы. Совместим с кабелями других производителей

Усовершенствованная формованная асферическая линза в оптике: глубина обзора **3-200мм**, снижение искажений, технология анти-запотевания

Надежный инсуффлятор со скоростью потока до **50л/мин**, функцией нагревания и эвакуацией дыма обеспечивает постоянство давления при аспирации или утечке газа



3 чиповая головка CMOS с оптическим зумом, легкая, с низкой интенсивностью нагрева. Парфокальная технология (фокусное расстояние 14-30мм) подходит для широкого профиля операций

4 режима для выбора типа операции

LED источник света эквивалентный 300Вт ксеноновому с цветовой температурой 3000-7000K и сроком службы >20000 часов работы. Совместим с кабелями других производителей



Жесткие эндоскопы высокого разрешения 10 мм 30°/0°  
Без искажений. FullHD + UltraHD

Большая глубина резкости 3-200 мм, поле зрения 80°

Линзы с защитой от запотевания

Адаптеры для совместимости со световодами различных производителей

Поддерживает 500 циклов автоклавирования ,  
низкотемпературную плазму, ЕТО






Высокая скорость потока 50 л/мин 7" сенсорный экран

7" сенсорный экран

5 режимов работы: Взрослый/ Детский/  
Бариатрический/ Работа в забрюшинном пространстве/  
Пользовательский)

Функции нагрева газа и эвакуации дыма

Автоматическое поддержание давления

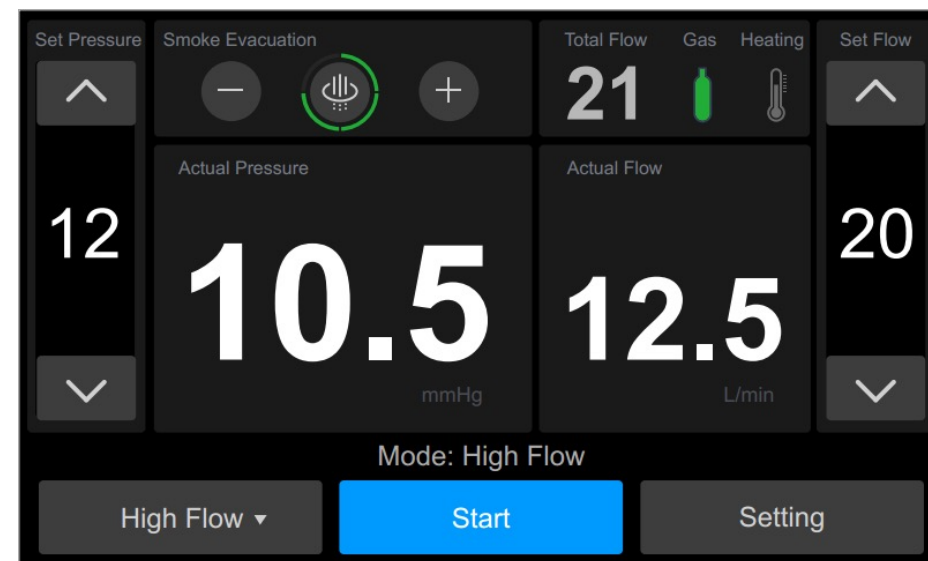




Ultra HD качество со сверхширокой цветовой гаммой и более точным расчетом экспозиции

8 предустановленных режимов работы для разных клинических случаев. Возможность записывать фото и видео на 2 USBносителя до 64гб или жесткий диск до 2Тб

LED источник света с сроком службы 60000 часов и сенсорной панелью управления

Универсальная платформа на эргономичной тележке с максимальной нагрузкой до 50 кг и удобным расположением кабелей: можно дополнять любыми блоками оборудования и инструментов



Мониторы 55" и 31" с технологией оптической склейки – изображение в реальном цвете с высоким уровнем контрастности и яркости, анти-блик

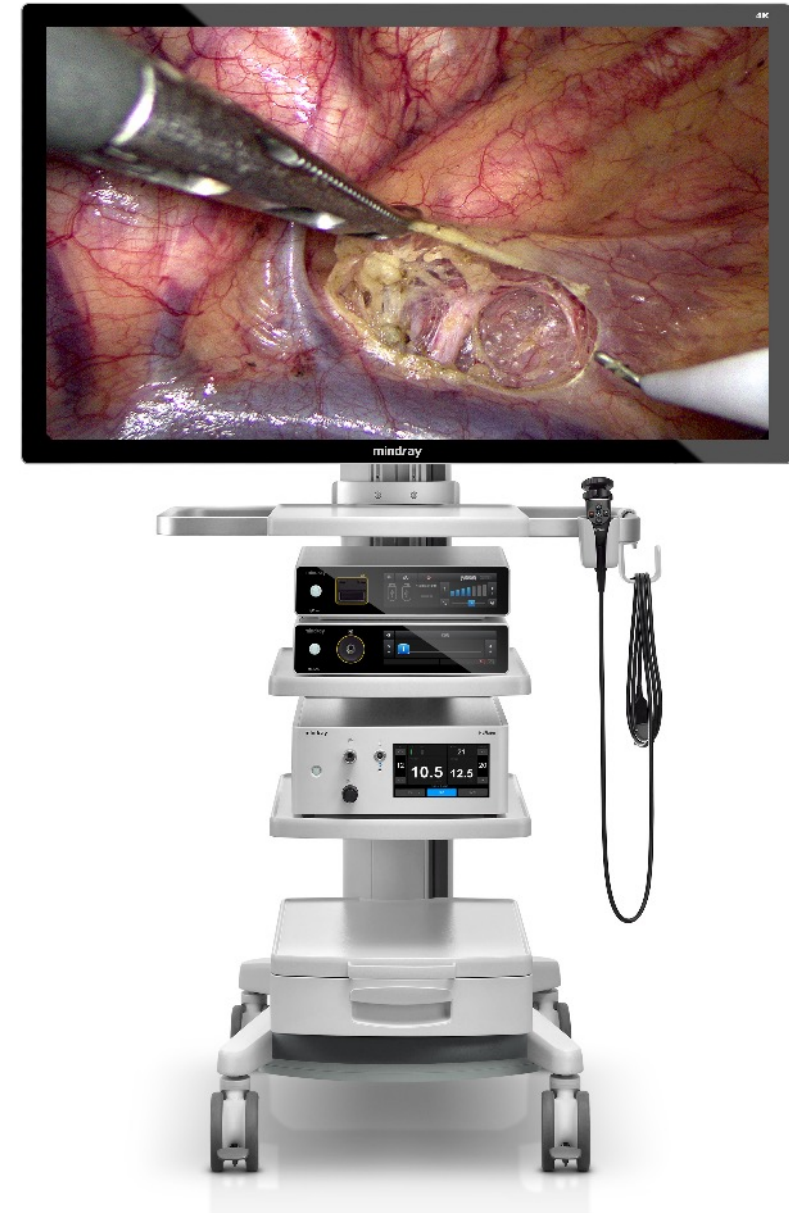

Ultra HD качество со сверхширокой цветовой гаммой и более точным расчетом экспозиции

8 предустановленных режимов работы для разных клинических случаев. Удобная быстрая настройка по цвету и насыщенности



LED источник света с сроком службы 60000 часов и сенсорной панелью управления: автодетекция кабеля, 10 уровней яркости, опция обозначения ошибок

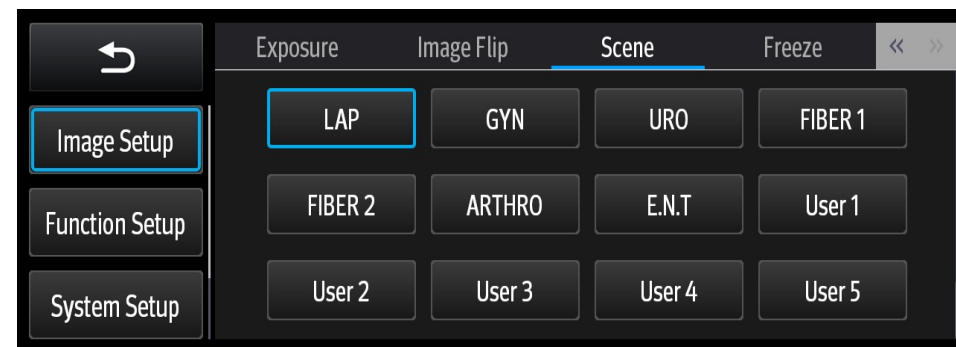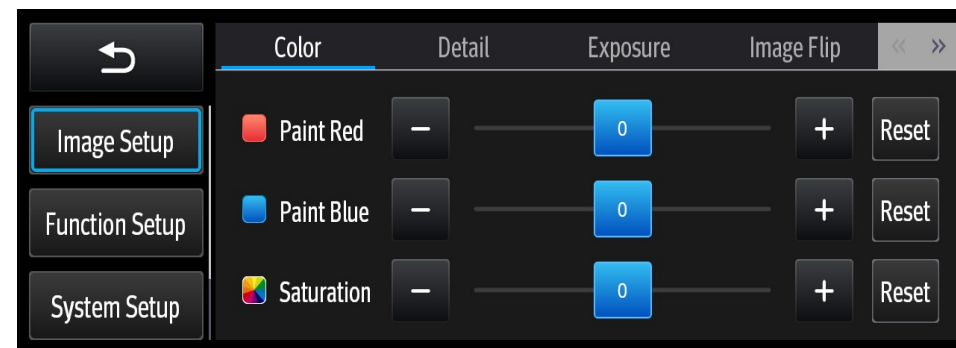

Видеовыходы:  
4K: 12G-SDI\*4、HDMI\*1  
FHD: 3G-SDI\*1、DVI-D\*1

Возможность записывать фото и видео на 2 USBносителя  
до 64гб или жесткий диск до 2Тб

Функция заметок

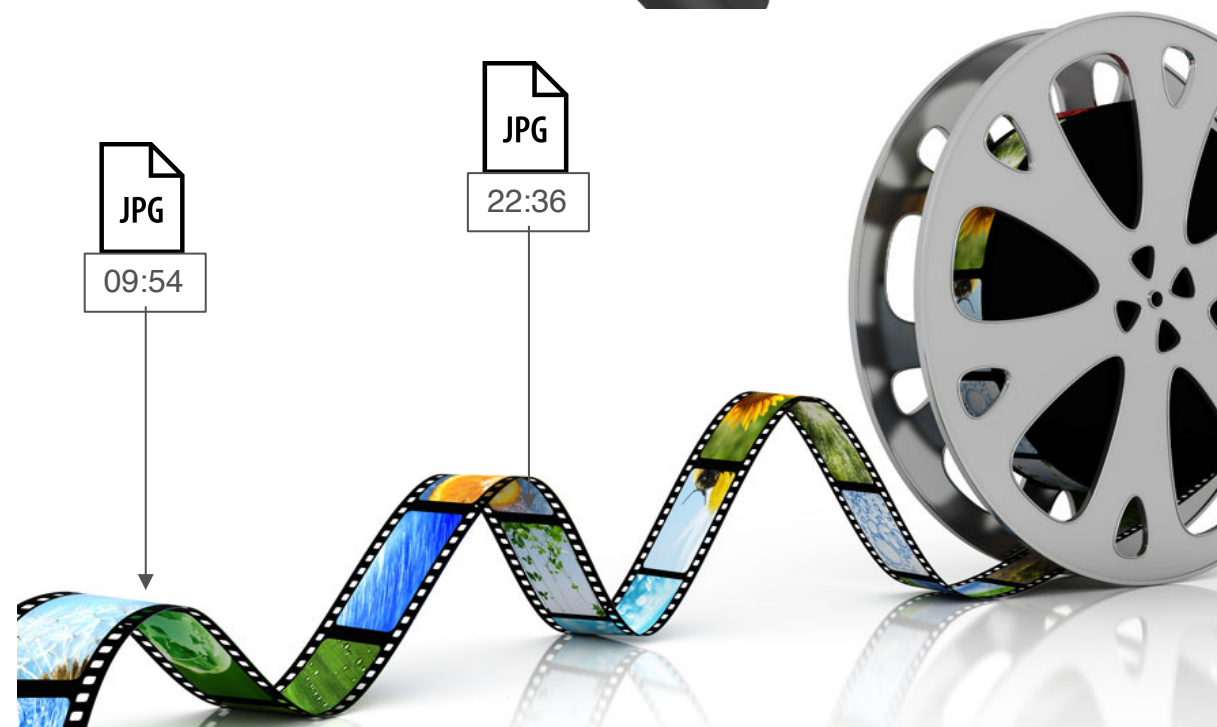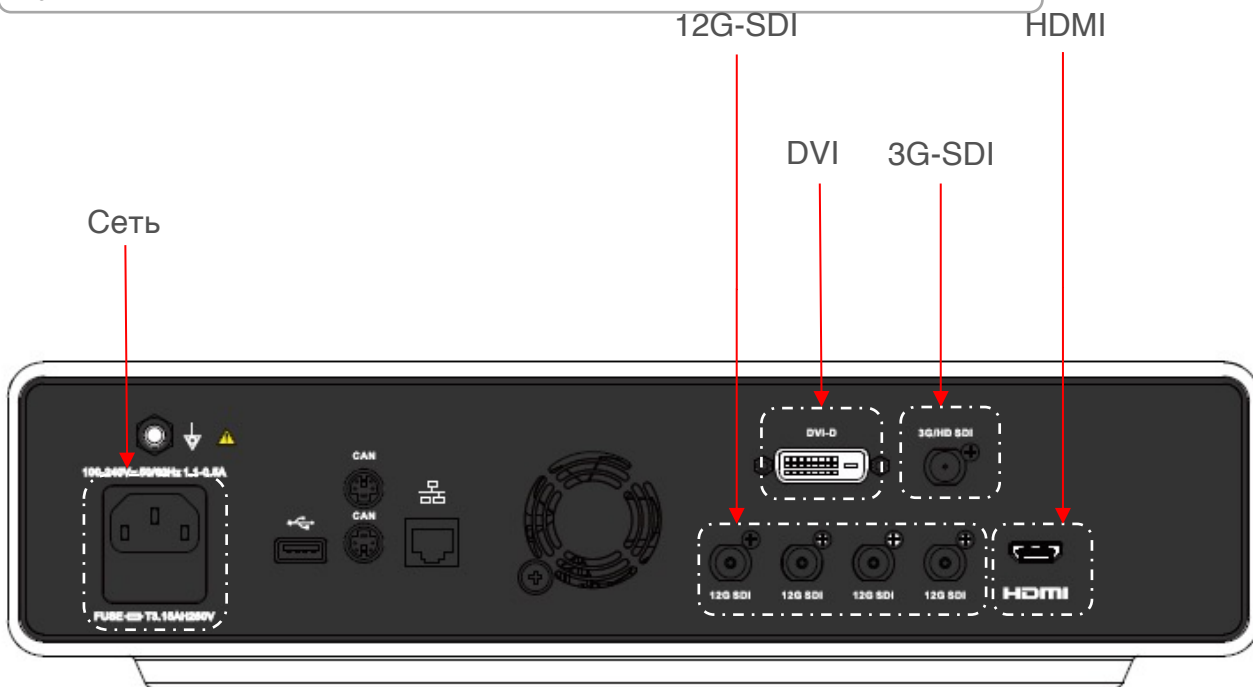

## Мониторы и тележки

Мониторы 55" и 31" для системы U1 и 27" для HD3 с технологией **оптической склейки** – изображение в реальном цвете с высоким уровнем контрастности и яркости, анти-блик

Универсальная платформа для U1 на эргономичной тележке с максимальной нагрузкой до 50 кг и удобным расположением кабелей: можно дополнять любыми блоками оборудования и инструментов


**mindray**





В операционной

**mindray**

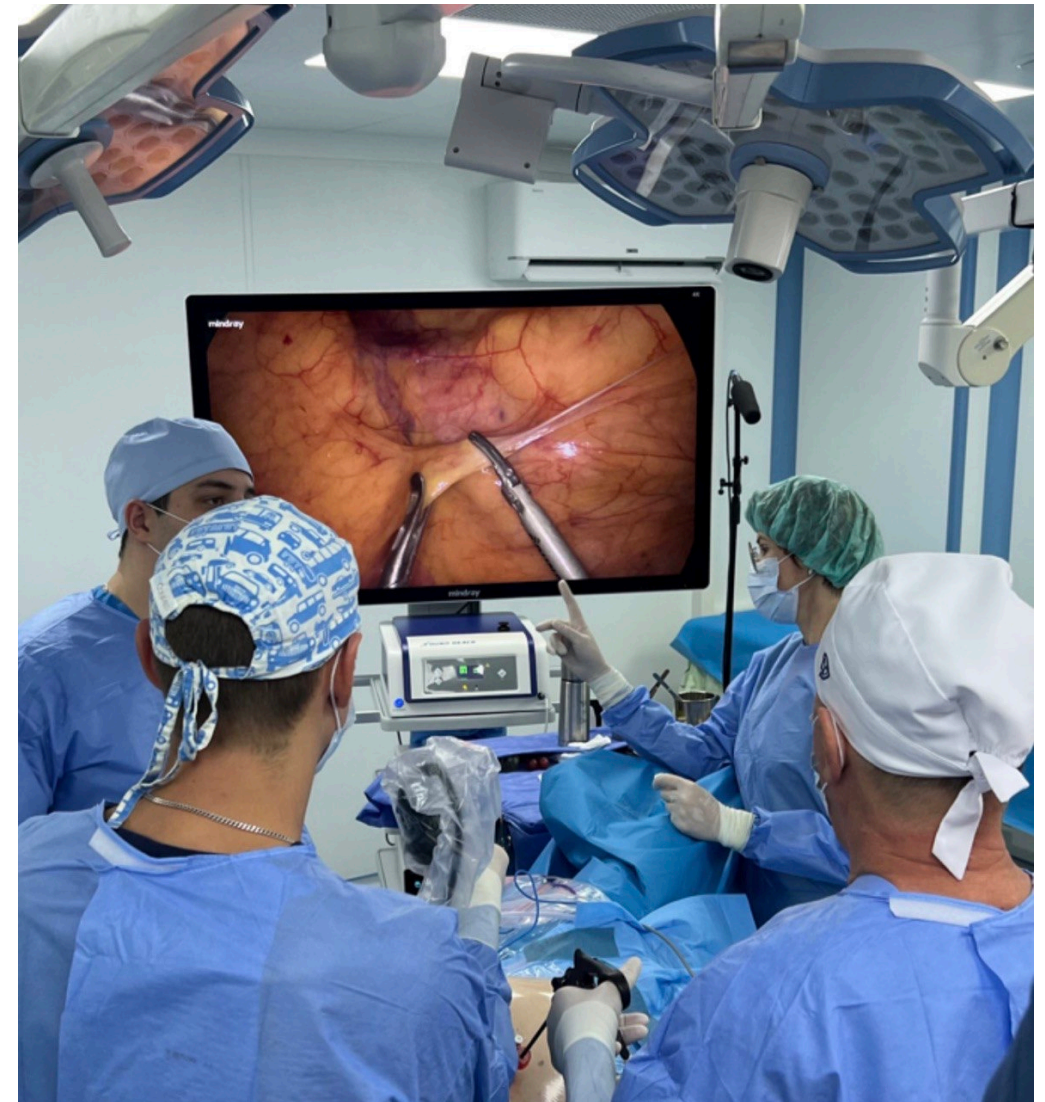






# Спасибо за внимание

**Ваш дилер оборудования Mindray**

 + 7 495 642 86 60

 + 7 800 500 93 80

 [info@nv-med.ru](mailto:info@nv-med.ru)

 [www.nv-med.ru](http://www.nv-med.ru)