

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ НВ



КАТАЛОГ 2019

Лабораторная мебель серии НВ предназначена для лабораторий самого широкого профиля: на предприятиях пищевой и легкой промышленности, учебных и научных учреждениях, центрах контроля качества, медицинских организаций и многих других.

Мебель изготавливается на современном оборудовании из высококачественных материалов. Несущие ламинированные панели окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает ударостойкость и механическую прочность изделий. В основании мебели – цельнометаллический сварной каркас, окрашенный прочной порошковой краской.

В стандартном исполнении мы предлагаем мебель серого цвета, по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, мы готовы изготовить мебель любого цвета, отвечающую вашим задачам.

Широкий выбор изделий серии НВ позволяет оптимально укомплектовать любую лабораторию. Кроме того, возможно изготовление нестандартных изделий по размерам заказчика.

Дополнительные услуги:

- доставка
- сборка
- шеф-монтажные работы
- сервисное обслуживание
- изготовление мебели по размерам заказчика



Оглавление

Материалы столешниц	2
Вытяжные шкафы	3
Вытяжные шкафы специализированные	6
Столы лабораторные без надстроек.....	7
Столы передвижные	8
Столы пристенные.....	8
Столы островные	10
Столы для весов.....	12
Столы для центрифуг.....	13
Столы для хроматографа	13
Столы для микроскопирования	13
Столы для титрования.....	14
Столы мойки	14
Столы письменные	16
Тумбы	16
Шкафы навесные	17
Шкафы для хранения	17
Стулья и табуреты лабораторные	19

Материалы столешниц

Керамогранит (плитка) устойчив к продолжительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей, а также способен выдерживать высокие температуры. Обладает повышенной (по сравнению с обычной керамикой) механической стойкостью. Ограничено стоек к плавиковой кислоте.

Монолитная керамика повышенной прочности устойчива к продолжительному воздействию кислот, щелочей и органических растворителей. Способна выдерживать высокие температуры. Обладает повышенной химической стойкостью (по сравнению с плиткой) вследствие отсутствия стыковочных швов.


Ламинат относительно влагостоек, устойчив к кратковременному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Непревзойденный материал по соотношению цена-качество.



Слоистый пластик устойчив к воздействию концентрированных кислот, щелочей. Ограничено стоек к воздействию высоких температур и длительному воздействию органических растворителей.

Полипропилен влагостоек, устойчив к продолжительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Ограничено стоек к воздействию высоких температур.

Вытяжные шкафы

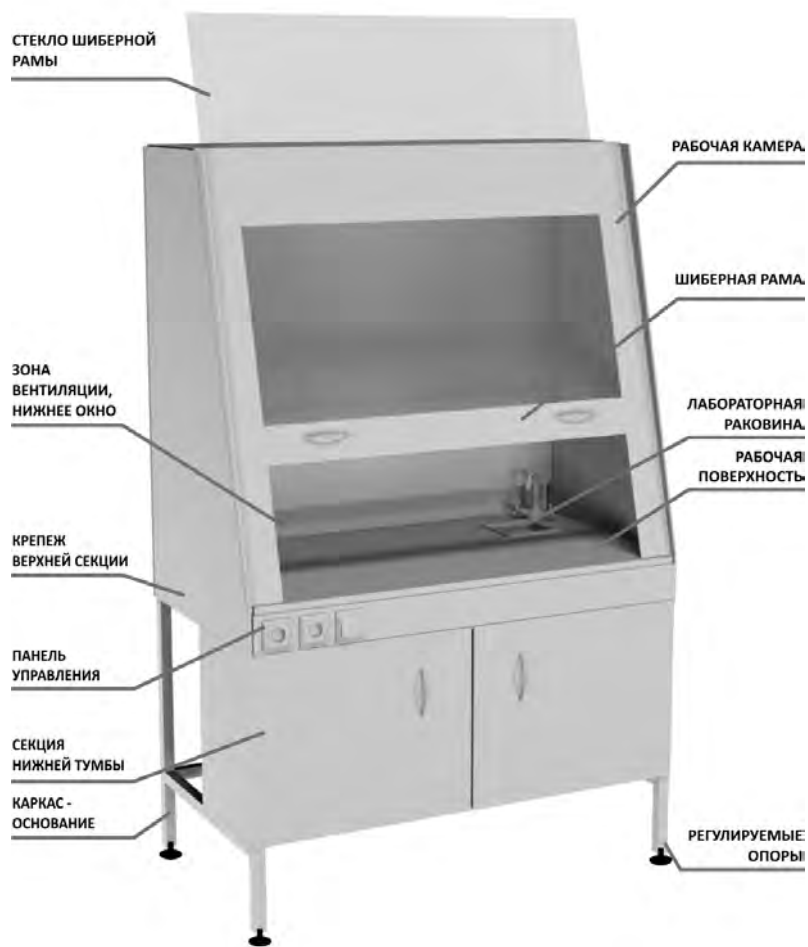

Стандартная комплектация:

- Столешница по выбору заказчика
- Фланец для подключения к системе вентиляции диаметром 160 мм
- Защитный экран
- 2 электророзетки (IP 20, 1.5 кВт)
- Светильник с выключателем на передней панели
- Тумба со съемной полкой (модели «Б» и «У»)
- Сливная раковина из полипропилена, сантехника
- Вытяжка из двух зон (купол вытяжного бокса и уровень столешницы)

Дополнительная комплектация (по запросу):

- Столешница из нержавеющей стали, эпоксидного керамзита типа Durcon,
- Взрывозащищенное исполнение
- Большая раковина со смесителем
- Кран для подвода природного газа, воздуха
- Вентиляционный блок, гофротруба
- Вытяжка из тумбы



Вытяжные шкафы с одной рамой

Наименование	Покрытие столешницы	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-1200 ШВ-М	ламинат	1100*700*1960	светильник, выключатель, без нижней тумбы
НВ-1200 ШВ-Б	керамогранит		светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-1200 ШВ-У	керамогранит		светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба, сантехника
НВ-1200 ШВ-ПБ	полипропилен		светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-1200 ШВ-СПБ	слоистый пластик		светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-1200 ШВ-Б-НЕРЖ	нержавеющая сталь		светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-1500 ШВ-М	ламинат	1410*700*1960	светильник, выключатель, без нижней тумбы
НВ-1500 ШВ-Б	керамогранит		светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-1500 ШВ-У	керамогранит		светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба, сантехника
НВ-1500 ШВ-ПБ	полипропилен		светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-1500 ШВ-СПБ	слоистый пластик		светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-1500 ШВ-Б-НЕРЖ	нержавеющая сталь		светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-1250 ШВ-БЦ	монолитная керамика	1240*700*1960	светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба с полкой



Вытяжные шкафы двухрамные

Наименование	Покрытие столешницы	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-1500 ШВд-М	ламинат	1410*700*1960	два подъемных стекла, светильник, выключатель, без нижней тумбы
НВ-1500 ШВд-Б	керамогранит		два подъемных стекла, светильник, выключатель, две электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-1500 ШВд-У	керамогранит		два подъемных стекла, светильник, выключатель, две электророзетки, нижняя тумба, сантехника
НВ-1500 ШВд-ПБ	полипропилен		два подъемных стекла, светильник, выключатель, две электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-1500 ШВд-СПБ	слоистый пластик		два подъемных стекла, светильник, выключатель, две электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-1800 ШВд-М	ламинат	1800*700*1960	два подъемных стекла, светильник, выключатель, без нижней тумбы
НВ-1800 ШВд-Б	керамогранит		два подъемных стекла, светильник, выключатель, две электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-1800 ШВд-У	керамогранит		два подъемных стекла, светильник, выключатель, две электророзетки, нижняя тумба, сантехника
НВ-1800 ШВд-ПБ	полипропилен		два подъемных стекла, светильник, выключатель, две электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-1800 ШВд-СПБ	слоистый пластик		два подъемных стекла, светильник, выключатель, две электророзетки, нижняя тумба с полкой

Вытяжные шкафы специализированные



Наименование	Назначение	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-1200 ШВ-ПП Камера и подстольная тумба полностью изготовлены из полипропилена	Шкаф вытяжной для кислот	1100*700*1960	столешница полипропилен, светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-1200 ШВ-ПП-О Подстольная тумба изготовлена из полипропилена	Шкаф вытяжной с отсеком для хранения кислот	1100*700*1960	столешница полипропилен, светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба с полкой
НВ-800 ШВп Камера вытяжного шкафа внутри обшита керамогранитом	Шкаф вытяжной для нагревательных печей малый	810*700*1960	столешница керамогранит, 2 электророзетки, без подстольной тумбы
НВ-1600 ШВп Камера вытяжного шкафа внутри обшита керамогранитом	Шкаф вытяжной для нагревательных печей большой	1610*700*1960	столешница керамогранит, 2 электророзетки, без подстольной тумбы
НВ-1200 ШВ-Пл Камера вытяжного шкафа внутри имеет встроенную в столешницу нагревательную плиту 300*400 (слева)	Шкаф вытяжной со встроенной нагревательной плитой ПН-4030	1100*700*1960	столешница керамогранит, светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба с полкой, встроенная плита нагрева
НВ-1200 ШВ-МО Камера вытяжного шкафа внутри имеет встроенную в столешницу полипропиленовую раковину	Шкаф вытяжной для мытья посуды	1100*700*1960	столешница керамогранит, светильник, выключатель, 2 электророзетки, нижняя тумба с полкой, полипропиленовая раковина, смеситель

Столы лабораторные без надстроек

Столы лабораторные низкие предназначены для работы сидя, а высокие – для работы стоя. Рабочие поверхности следует выбирать, исходя из задач лаборатории. По заказу столешница может быть выполнена из нержавеющей стали, эпоксидного керамзита типа Durcon. Дополнительно столы могут быть укомплектованы подкатными тумбами (см. стр 16), выдвижными ящиками, электророзетками.



Столы лабораторные низкие


Наименование	Покрытие столешницы	Габаритные размеры (ш*г*в)
НВ-800 ЛЛн	ламинат	700*700*750
НВ-1200 ЛЛн		1090*700*750
НВ-1500 ЛЛн		1500*700*750
НВ-1200 ЛКн	керамогранит	1090*700*750
НВ-1500 ЛКн		1500*700*750
НВ-1200 ЛПн	полипропилен	1090*700*750
НВ-1500 ЛПн		1500*700*750
НВ-1200 ЛСПн	слоистый пластик	1090*700*750
НВ-1500 ЛСПн		1500*700*750
НВ-1210 ЛЦн	монолитная керамика	1210*610*750

Столы лабораторные высокие

Наименование	Покрытие столешницы	Габаритные размеры (ш*г*в)
НВ-1200 ЛЛв	ламинат	1090*700*850
НВ-1500 ЛЛв		1500*700*850
НВ-1200 ЛКв	керамогранит	1090*700*850
НВ-1500 ЛКв		1500*700*850
НВ-1200 ЛПв	полипропилен	1090*700*850
НВ-1500 ЛПв		1500*700*850
НВ-1200 ЛСПв	слоистый пластик	1090*700*850
НВ-1500 ЛСПв		1500*700*850
НВ-1210 ЛЦв	монолитная керамика	1210*610*850

Стол� передвижные

Стол� передвижные предназначены для установки аппаратуры и инструментов. Столешница выполнена из ламината. Другие варианты столешниц возможны по отдельному заказу.

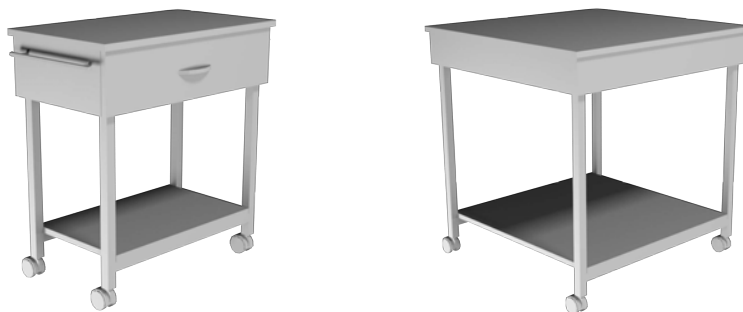

Наименование	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-600 СТП	600*350*650	выдвижной ящик, полка, две металл. ручки
НВ-800 СТП	730*700*750	полка

Стол� лабораторные пристенные



Стол� пристенные используются в каждой лаборатории. Физические стол� имеют исполнения без сантехники, химические снабжены полипропиленовой раковиной и краном холодной воды.

Стол� могут комплектоваться подкатными тумбами (см. стр. 16), кранами для специальных газов.

Широкий выбор базовых вариантов рабочих поверхностей. По заказу столешница может быть выполнена из нержавеющей стали, эпоксидного керамзита типа Durcon. Возможно изготовление пристенных столов длиной до 3000 мм.

Стол� пристенные физические

Наименование	Покрывтие столешницы	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-800 ПЛ	ламинат	760*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками
НВ-1200 ПЛ		1218*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками
НВ-1500 ПЛ		1520*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с 3 ящиками, тумба с дверцей
НВ-800 ПК	керамогранит	760*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками
НВ-1200 ПК		1218*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками
НВ-1500 ПК		1520*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с 3 ящиками, тумба с дверцей

НВ-800 ПК-М	керамогранит	760*700*1650	надстройка без электроразводки, без тумб
НВ-1200 ПК-М		1218*700*1650	надстройка без электроразводки, без тумб
НВ-1500 ПК-М		1520*700*1650	надстройка без электроразводки, без тумб
НВ-800 ПП	полипропилен	760*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками
НВ-1200 ПП		1218*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками
НВ-1500 ПП		1520*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с 3 ящиками, тумба с дверцей
НВ-800 ПСП	слоистый пластик	760*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками
НВ-1200 ПСП		1218*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками
НВ-1500 ПСП		1520*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с 3 ящиками, тумба с дверцей
НВ-1210 ПЦ	монолитная керамика	1210*626*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками



Столы пристенные химические

Наименование	Покрытие столешницы	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-800 ПЛХ	ламинат	760*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, сантехника
НВ-1200 ПЛХ		1218*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, сантехника, тумба с тремя ящиками
НВ-1500 ПЛХ		1520*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, сантехника, тумба с 3 ящиками, тумба с дверцей
НВ-800 ПКХ	керамогранит	760*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, сантехника
НВ-1200 ПКХ		1218*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, сантехника, тумба с 3 ящиками
НВ-1500 ПКХ		1520*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, сантехника, тумба с 3 ящиками, тумба с дверцей
НВ-800 ППХ	полипропилен	760*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, сантехника
НВ-1200 ППХ		1218*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, сантехника, тумба с тремя ящиками
НВ-1500 ППХ		1520*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, сантехника, тумба с 3 ящиками, тумба с дверцей
НВ-800 ПСПХ	слоистый пластик	760*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, сантехника
НВ-1200 ПСПХ		1218*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, сантехника, тумба с тремя ящиками
НВ-1500 ПСПХ		1520*700*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, сантехника, тумба с 3 ящиками, тумба с дверцей

Столы островные

Столы островные предназначены для установки в центре лаборатории. Физические столы имеют исполнения без сантехники, химические снабжены полипропиленовой раковиной и краном холодной воды.

Столы могут комплектоваться подкатными тумбами (см. стр. 16), кранами для специальных газов.

Широкий выбор базовых вариантов рабочих поверхностей. По заказу столешница может быть выполнена из нержавеющей стали, эпоксидного керамзита типа Durcon
Возможно изготовление островных столов длиной до 3000 мм.



Столы островные физические

Наименование	Покрытие столешницы	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-800 ОЛ	ламинат	760*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками с каждой стороны
НВ-1200 ОЛ		1218*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками с каждой стороны
НВ-1500 ОЛ		1520*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками, тумба с дверцей с каждой стороны
НВ-2400 ОЛ		2420*1520*1650	надстройка с двумя светильниками и четырьмя розетками, тумба с тремя ящиками, две тумбы с дверцей с каждой стороны
НВ-800 ОК	керамогранит	760*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками с каждой стороны
НВ-1200 ОК		1218*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками с каждой стороны
НВ-1500 ОК		1520*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками, тумба с дверцей с каждой стороны
НВ-2400 ОК		2420*1520*1650	надстройка с двумя светильниками четырьмя розетками, тумба с тремя ящиками, две тумбы с дверцей с каждой стороны

НВ-800 ОП	полипропилен	760*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками с каждой стороны
НВ-1200 ОП		1218*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками с каждой стороны
НВ-1500 ОП		1520*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками, тумба с дверцей с каждой стороны
НВ-2400 ОП		2420*1520*1650	надстройка с двумя светильниками и четырьмя розетками, тумба с тремя ящиками, две тумбы с дверцей с каждой стороны
НВ-800 ОСП	слоистый пластик	760*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками с каждой стороны
НВ-1200 ОСП		1218*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками с каждой стороны
НВ-1500 ОСП		1520*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками, тумба с дверцей с каждой стороны
НВ-2400 ОСП		2420*1520*1650	надстройка с двумя светильниками и четырьмя розетками, тумба с тремя ящиками, две тумбы с дверцей с каждой стороны

Столы островные химические

Наименование	Покрытие столешницы	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-800 ОЛХ	ламинат	760*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками с каждой стороны, сантехника
НВ-1200 ОЛХ		1218*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками с каждой стороны, сантехника
НВ-1500 ОЛХ		1520*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками, тумба с дверцей с каждой стороны, сантехника
НВ-2400 ОЛХ		2420*1520*1650	надстройка с двумя светильниками и четырьмя розетками, тумба с тремя ящиками, две тумбы с дверцей с каждой стороны, сантехника
НВ-800 ОКХ	керамогранит	760*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками с каждой стороны, сантехника
НВ-1200 ОКХ		1218*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками с каждой стороны, сантехника
НВ-1500 ОКХ		1520*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками, тумба с дверцей с каждой стороны, сантехника
НВ-2400 ОКХ		2420*1520*1650	надстройка с двумя светильниками и четырьмя розетками, тумба с тремя ящиками, две тумбы с дверцей с каждой стороны, сантехника

НВ-800 ОПХ	полипропилен	760*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками с каждой стороны, сантехника
НВ-1200 ОПХ		1218*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками с каждой стороны, сантехника
НВ-1500 ОПХ		1520*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками, тумба с дверцей с каждой стороны, сантехника
НВ-2400 ОПХ		2420*1520*1650	надстройка с двумя светильниками и четырьмя розетками, тумба с тремя ящиками, две тумбы с дверцей с каждой стороны, сантехника
НВ-800 ОСПХ	слоистый пластик	760*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками с каждой стороны, сантехника
НВ-1200 ОСПХ		1218*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками с каждой стороны, сантехника
НВ-1500 ОСПХ		1520*1520*1650	надстройка со светильником и двумя розетками, тумба с тремя ящиками, тумба с дверцей с каждой стороны, сантехника
НВ-2400 ОСПХ		2420*1520*1650	надстройка с двумя светильниками и четырьмя розетками, тумба с тремя ящиками, две тумбы с дверцей с каждой стороны, сантехника

Столы для весов



Отличительной особенностью столов для весов серии НВ является отсутствие в конструкции гранитных либо других материалов, не отвечающих эстетике лаборатории. Утяжелитель на основе бетонной плиты вмонтирован снизу дополнительной съемной столешницы. Таким образом, стол, с одной стороны, имеет привлекательный внешний вид и полностью соответствует стилю лаборатории, а с другой – полностью выполняет функции демпфирования.

Наименование	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-750 ВГ	750*600*750	бетонная плита на песчаной подушке, столешница ламинат
НВ-1200 ВГ	1200*600*750	бетонная плита на песчаной подушке, дополнительная ламинированная рабочая поверхность (справа)

Стол для центрифуг

Специальные антивибрационные столы НВ необходимы для гашения вибраций создаваемых центрифугой во время работы. В конструкции стола предусмотрен утяжелитель, в основе которого бетонная плита на песчаной подушке, которая вмонтирована снизу дополнительной съемной столешницы. Данное решение и обеспечивает демпфирование - гасит вибрацию.



Наименование	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-800 СЦб	860*860*750	бетонная плита 660*660 на песчаной подушке, столешница ламинат
НВ-800 СЦм	860*750*750	бетонная плита 550*660 на песчаной подушке, столешница ламинат

Стол для хроматографа




Стол лабораторный с усиленным каркасом и розетками. Столы разработаны специально для установки хроматографов и другой аналитической техники. Столешница выполнена из керамогранита. По заказу возможна комплектация выдвижными ящиками.

Наименование	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-1500 ЛХ-О	1500*700*850	столешница керамогранит, электропанель с двумя розетками, без тумб
НВ-1500 ЛХ-З		столешница керамогранит, электропанель с двумя розетками, встроенная тумба с двумя дверцами

Стол для микрофотоирования

Стол для микрофотоирования с ламинированной столешницей. Для удобства работы разработана модель с полукруглым вырезом.

Наименование	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-1500 СМ	1500*700*750	надстройка
НВ-1500 СМ-В	1500*700*750	надстройка, вырез в столешнице

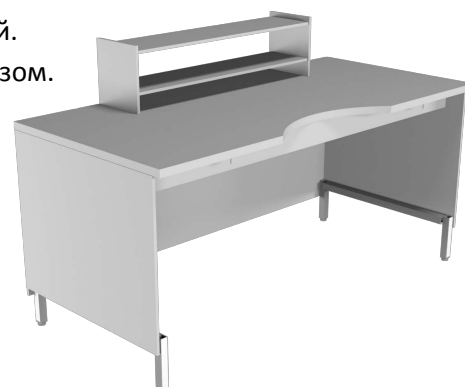

Столы для титрования

Столы для титрования в базовом варианте изготавливаются без тумб. В комплект входят стойки для бюреток, экран с подсветкой, выключатель, электророзетка. Дополнительная комплектация (опция): лапки для бюреток, подкатные тумбы (см. стр. 16)



Наименование	Покрытие столешницы	Габаритные размеры (ш*г*в)
НВ-1200 ТЛ	ламинат	1200*700*1650
НВ-1400 ТЛ		1400*700*1650
НВ-1200 ТК	керамогранит	1200*700*1650
НВ-1400 ТК		1400*700*1650
НВ-1200 ТСП	слоистый пластик	1200*700*1650
НВ-1400 ТСП		1400*700*1650

Держатель для бюреток



Используется для надежной фиксации бюреток на лабораторных штативах и в титровальных установках.

Столы мойки

В зависимости от задач рекомендуется выбирать раковину из нержавеющей стали или из полипропилена. По заказу возможна установка раковины из эпоксидного керамзита Durcon, монолитной керамики




Наименование	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация	Раковина
НВ-800 МО-Б	800*600*850	одинарная мойка	нерж.сталь, глубина 16 см
НВ-800 МО	800*600*1650	одинарная мойка, сушилка	нерж.сталь, глубина 16 см
НВ-800 МД-Б	800*600*850	двойная мойка	нерж.сталь, глубина 16 см
НВ-800 МД	800*600*1650	двойная мойка, сушилка	нерж.сталь, глубина 16 см
НВ-800 МОП-Б	800*600*850	одинарная мойка	полипропилен, глубина 29 см
НВ-800 МОП	800*600*1650	одинарная мойка, сушилка	полипропилен, глубина 29 см
НВ-1000 МД	1000*600*1650	двойная мойка, сушилка	нерж.сталь,, глубина 29 см
НВ-1000 МОП-Б	1000*600*850	одинарная мойка	полипропилен, глубина 29 см
НВ-1000 МО	1000*600*1650	одинарная мойка, сушилка	полипропилен, глубина 29 см

Дополнительная комплектация (опция): сушилка настенная/настольная

Количество посадочных гнезд - 55.

*Размер 650x360*210 мм.*

В комплект поставки входит поддон для сбора жидкости.

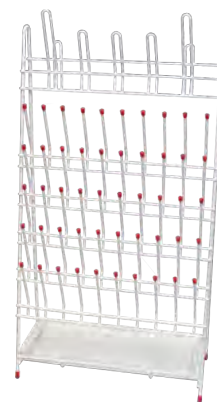

Сушилка для пробирок и колб 0362А
Сушилка выполнена из полипропилена.
Сушилка настенная/настольная
Количество посадочных гнезд - 52 шт. Размер (ШхВхГ) 550x700x125 мм.



Сушилка для пробирок и колб 0362В
Сушилка выполнена из полипропилена.
Сушилка настенная/настольная
Количество посадочных гнезд - 27 шт.
Размер (ШхВхГ) 400x550x110 мм.



Столы письменные

Столы письменные/компьютерные рекомендуется использовать в процессах, не подразумевающих использования агрессивных химических реагентов.



Наименование	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-1200 СП	1200*600*750	тумба с тремя ящиками
НВ-1500 СП	1500*600*750	тумба с тремя ящиками, тумба с дверцей
НВ-1200 СК (для компьютера)	1200*600*750	тумба с 3-мя ящиками, подставка под сист. блок

Тумбы



Наименование	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-400 ТДЯ	420*460*650	выдвижной ящик, дверца, полка-вкладыш
НВ-400 ТЯ		3 выдвижных ящика, колесные опоры
НВ-400 ТД		дверца, полка-вкладыш, колесные опоры
НВ-600 ТД	600*460*650	две дверцы, полка-вкладыш, колесные опоры
НВ-400 ТДЯн	420*460*600	выдвижной ящик, дверца, полка-вкладыш
НВ-400 ТЯн		3 выдвижных ящика, колесные опоры
НВ-400 ТДн		дверца, полка-вкладыш, колесные опоры
НВ-600 ТДн	600*460*600	две дверцы, полка-вкладыш, колесные опоры

Шкафы навесные



Наименование	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-800 НС	800*350*550	полка-вкладыш, без дверей
НВ-800 НШ	800*350*550	полка-вкладыш, 2 дверцы ЛДСП
НВ-800 НШс	800*350*550	полка-вкладыш, 2 стеклянные дверцы
НВ-1200 НС	1200*350*550	полка-вкладыш, без дверей
НВ-1200 НШ	1200*350*550	полка-вкладыш, 2 дверцы ЛДСП
НВ-1200 НШс	1200*350*550	полка-вкладыш, 2 стеклянные дверцы

Шкафы для хранения

Шкафы предназначены для хранения приборов и материалов в лаборатории.

Дополнительная комплектация (опции):

- замок в двери
- полипропиленовые поддоны для хранения химреактивов
- выдвигаемые ящики





Наименование	Назначение	Габаритные размеры (ш*г*в)	Комплектация
НВ-400 ШО	Для одежды	400*460*1820	1 дверца, полка для шапок, полка для обуви, штанга для одежды
НВ-400 ШР	Для химреактивов		2 дверцы (сверху и снизу), 4 полки-вкладыша
НВ-400 ШР-В	Для химреактивов, с вытяжным патрубком		2 дверцы (сверху и снизу), 4 полки-вкладыша, патрубок для подключения вентиляции
НВ-400 ШБ	Для одного газового баллона		1 дверца, цепное крепление для баллона
НВ-800 ШО	Для одежды	800*460*1820	2 дверцы, полка для шапок, полка для обуви, штанга для одежды
НВ-800 ШР	Для химреактивов		4 дверцы, 8 полок-вкладышей, средняя стенка
НВ-800 ШР-В	Для химреактивов, с патрубком для подключения к вентиляции		4 дверцы, 8 полок-вкладышей, средняя стенка, патрубок для подключения к вентиляции
НВ-800 ШП	Для лабораторной посуды		сверху стекл.дверцы и две стекл.полки, снизу 4 выдвижн. ящика, дверца, 2 полки-вкладыша
НВ-800 ШД	Для документов		4 стекл.дверцы, 4 полки-вкладыша
НВ-800 ШД-О	Для документов, открытый стеллаж без дверей		4 полки-вкладыша
НВ-800 ШБ	Для газовых баллонов		2 дверцы, цепное крепление для баллонов
НВ-800 ШПр	Для приборов		4 дверцы, 4 полки-вкладыша
НВ-1200 ШПр	Для приборов, большой	1200*460*1820	2 дверцы, 4 полки вкладыша, 6 выдвижных ящиков
НВ-600 ШИ	Для хранения инвентаря	600*460*1820	с одной стороны пространство без полок, с другой 4 полки-вкладыша

Стулья и табуреты лабораторные

Стулья и табуреты в лабораторном исполнении с покрытием из искусственной кожи..



Стул лабораторный +

механизм подъема - газ лифт
кольцо-подставка для ног

Табурет лабораторный +

механизм подъема - газ лифт
кольцо-подставка для ног



**Табурет лабораторный
НС-8004**

механизм подъема - газ лифт
кольцо-подставка для ног

**Кресло лабораторное
КР-09**

механизм подъема - винтовой
кольцо-подставка для ног





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Корса». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115407, Российская Федерация, город Москва, улица Речников, дом 7, строение 22, помещение 1, Основной государственный регистрационный номер: 1177746090323, телефон: +7 (495)963-74-70, адрес электронной почты: 6382255@mail.ru

в лице Генерального директора Полосина Сергея Алексеевича

заявляет, что Мебель лабораторная за исключением мебели медицинской лабораторной, в наборах и отдельными предметами: шкафы, столы, тумбы, марки «НВ» и «НВ-комфорт».

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Корса»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 115407, Российская Федерация, город Москва, улица Речников, дом 7, строение 22, помещение 1.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 10 580 9, 9403 10 910 0, 9403 10 980 9, 9403 30 190 0, 9403 30 990 0, 9403 30 910 0

серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 06938-220-1-18/БМ от 18.04.2018 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Инновационные решения", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90. Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия.

Условия хранения: Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Срок службы указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.04.2023 включительно



Полосин Сергей Алексеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.AY04.B.67419

Дата регистрации декларации о соответствии 19.04.2018



Москва, ул. Богородский вал, д. 3
Тел./факс: +7 (495) 642-86-60
(многоканальный)
Бесплатный тел.: 8-800-500-93-80
www.nv-lab.ru